


OXÍMETRO DE PULSO




Medidor de la saturación de oxígeno en sangre y frecuencia de pulso cardíaco. Un dispositivo esencial para tenerlo en casa, cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil.

CARACTERÍSTICAS

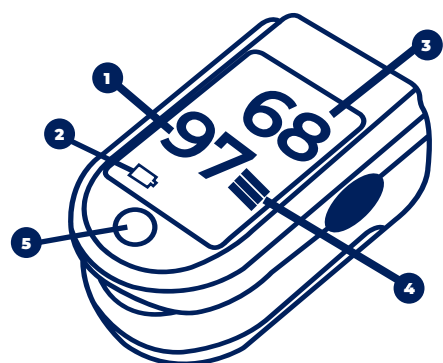


- 1 Valor SpO2**
Calor normal en adulto $\geq 95\%$.
- 2 Batería**
Indicador de batería baja, apagado automático tras 5 segundos sin operación.
- 3 Frecuencia de pulso**
Rango normal en adulto: 60-100 bpm/ minuto.
- 4 Gráfica de barras**
Gráfica de pulso en tiempo real.
- 5 Botón de inicio**
Activación en un solo clic.

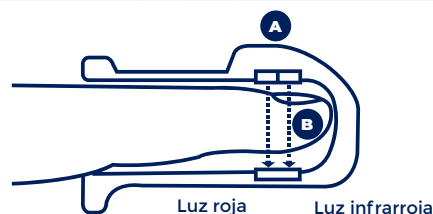

- A LED**
Luz infrarroja y luz roja se iluminan a través del dedo.
- B Absorción de luz**
La manera en que se absorbe la luz permite que el dispositivo calcule la cantidad de oxígeno en la sangre. La hemoglobina oxigenada en la sangre absorbe más luz infrarroja y deja pasar más luz roja.

MODO DE USO

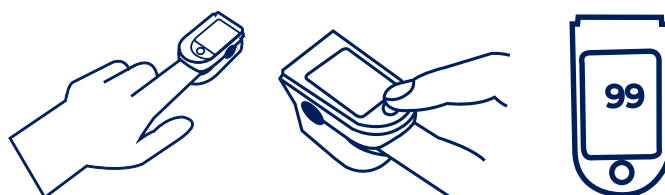

- 1** Para comenzar la prueba, coloque un dedo en el oxímetro.
- 2** Presione el botón sin mover el dedo del dispositivo, tan solo en unos segundos, el dispositivo recopilará información precisa.
- 3** El dispositivo mostrará lecturas de los niveles de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.

Una lectura de SpO2 que oscila entre el 95 % y el 100 % se considera normal.

